


Zalecane ustawienia strony Nightscout do współpracy z pilotem Med-Link.

Zalogować się do swojej strony utworzonej na heroku:

<https://id.heroku.com/login>

w zakładce Settings kliknąć w okno Reveal Config Vars:

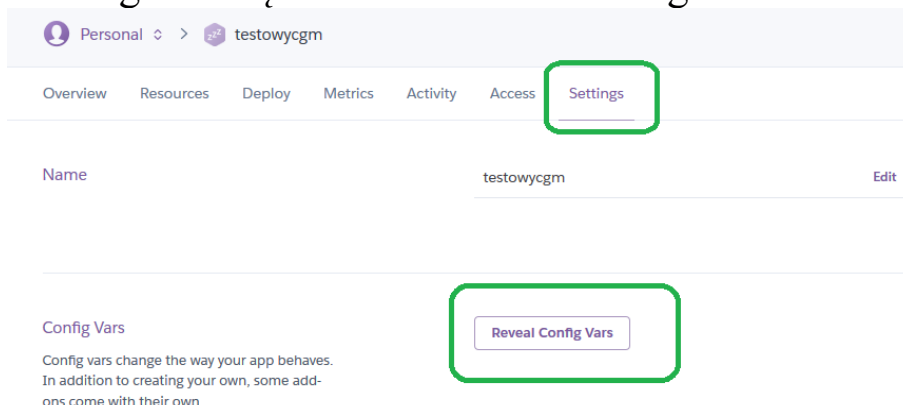

Oprócz wszystkich domyślnych ustawień można dołączyć poniższe parametry i wartości, aby wydobyć więcej wyświetlanych informacji na swojej stronie Nightscout:

BASAL_RENDER default

DEVICESTATUS_ADVANCED true

ENABLE pump boluscalc careportal food rawbg iob cob bwp iage
cage basal treatmentnotify upbat sage bage

LANGUAGE pl

PUMP_FIELDS reservoir battery clock status device

PUMP_URGENT_BATT_V 1.20

PUMP_WARN_BATT_V 1.25

SCALE_Y linear

SHOW_PLUGINS pump boluscalc careportal food rawbg iob cob
bwp iage cage basal treatmentnotify upbat sage bage

THEME colors

TIME_FORMAT 24

CUSTOM_TITLE wpisać_nazwę_użytkownika